
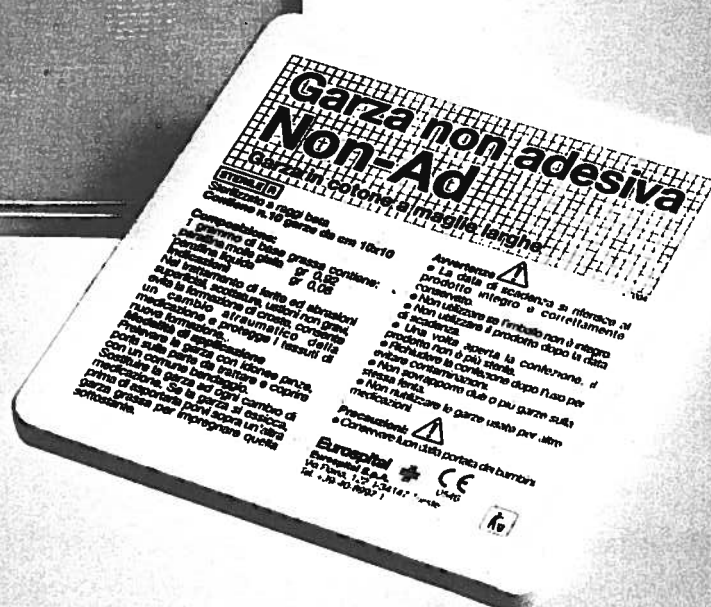


Garza Non-Ad

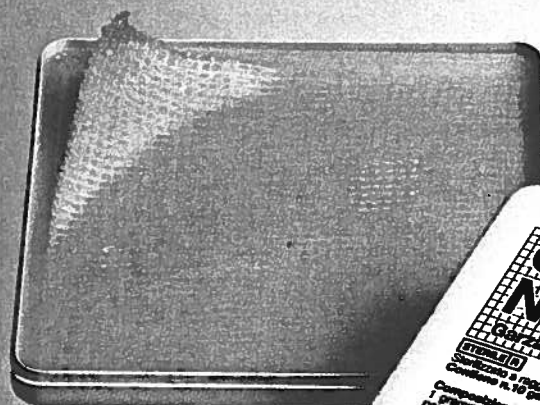

Consente di impostare una terapia personalizzata della ferita in base alle indicazioni mediche e alla tolleranza del paziente.

Garza Non-Ad

Nota informativa

Garza Non-Ad è una garza non adesiva a maglie larghe in cotone immersa in paraffina.

Un grammo di base grassa contiene:

Paraffina molle gialla	g 0,92
Paraffina liquida	g 0,08

Garza Non-Ad viene preparata in locali a contaminazione controllata e quindi sterilizzata mediante trattamento con radiazioni ionizzanti. Garza Non-Ad è neutra, consente di personalizzare il trattamento della ferita aggiungendo, ove necessario, sostanze antisettiche o terapeutiche in base alle indicazioni mediche e alla tolleranza del paziente.

Garza Non-Ad, senza aderire ai tessuti lesi, lascia passare gli essudati della ferita che vengono assorbiti dal bendaggio soprastante; si evita la formazione di croste e il cambio della medicazione avviene in modo atraumatico proteggendo i tessuti di nuova formazione.

Garza Non-Ad favorisce il drenaggio e la pulizia della ferita, la formazione del tessuto di granulazione e la guarigione fisiologica.

Indicazioni

Trattamento di ferite ed abrasioni superficiali, scottature e ustioni non gravi.

Confezioni

Codice 144
confezione di 40 garze
da cm 10 x 10;
scatola da 28 confezioni.

Codice 139
confezione di 10 garze
da cm 10 x 10;
scatola da 48 confezioni.

Codice 143
confezione di 40 garze
da cm 5 x 5;
scatola da 100 confezioni.

Dispositivo Medico
Classe IIa CE 0123.
Codice CND: M02030201