

# Scheda Tecnica

## DISPOSITIVO DI INSERIMENTO MINIMED™ SIL-SERTER™ MMT-385

Medtronic

### MINIMED™ SIL-SERTER™

Dispositivo di inserimento  
per set di infusione  
MiniMed™ Silhouette™

CODICE: MMT-385



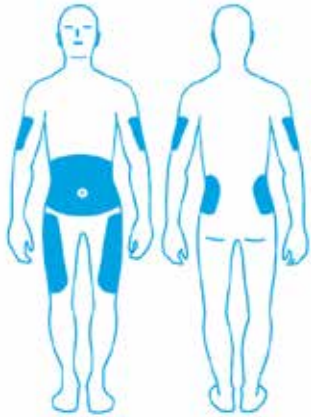
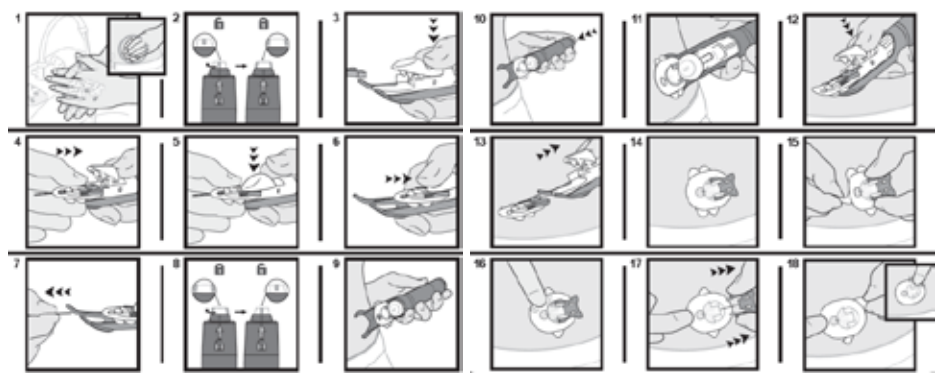
### Descrizione e Indicazioni di utilizzo

<b>Descrizione e indicazione d'uso:</b>	MiniMed™ Sil-serter™ è un dispositivo di ausilio per il posizionamento dei set di infusione <b>MiniMed™ Silhouette™</b> nel sottocute, con sistema di caricamento a molla e pulsante di rilascio a scatto, particolarmente indicato in caso di difficoltà ad inserire il set manualmente.
<b>Avvertenze:</b>	<p>Se prima dell'inserimento il set di infusione non viene posizionato correttamente nel dispositivo di inserimento con l'ago puntato in avanti, il paziente potrebbe provare dolore o subire piccole lesioni.</p> <p>Non puntare mai il dispositivo di inserimento caricato verso qualsiasi parte del corpo in cui non si desideri praticare l'inserimento.</p> <p>Preparare adeguatamente il sito prima dell'inserimento del set di infusione stesso.</p> <p>Prima dell'inserimento, assicurarsi che il cappuccio di protezione dell'ago sia stato rimosso.</p>

## Informazioni

<b>Nome prodotto:</b>	Dispositivo di inserimento <b>MiniMed™ Sil-serter™</b>
<b>Fabbricante:</b>	Medtronic Minimed 18000 Devonshire Street Northridge CA, 91325 USA
<b>Società autorizzata alla commercializzazione in Italia:</b>	Medtronic Italia S.p.A. Via Varesina, 162 20156 – Milano (MI)
<b>Marchio CE:</b>	N° 8857
<b>Classe CE di appartenenza:</b>	<b>Classe I, allegato VII</b> (Direttiva Europea 93/42/EEC concernente i dispositivi medici di classe recepita nella legislazione italiana con D. Lgs. n. 46 emendato col D. Lgs. 25.01.2010, n.37 - recepimento Direttiva 2007/47/CE)
<b>Codice GMDN:</b>	12727 – Needle introducer
<b>Codice CND:</b>	A018003, INTRODUTTORE PER AGHI
<b>N° di repertorio</b>	45248/R
<b>Manutenzione e pulizia</b>	<p>Pulire il dispositivo di inserimento strofinando con acqua saponata, utilizzando un detergente liquido o un altro sapone per uso domestico. Risciacquare il sapone dal dispositivo strofinando con acqua pulita. Lasciare asciugare.</p> <p>Disinfettare il dispositivo di inserimento con una soluzione di candeggina al 9% o di alcol isopropilico al 70%.</p> <p>Conservare il dispositivo di inserimento in posizione di rilascio per ottimizzare le sue prestazioni e la sua durata dispositivo in ottime condizioni e farlo durare a lungo.</p>
<b>Confezionamento</b>	Confezione singola da 1 pezzo.

## Specifiche tecniche

<b>Tipo di utilizzo:</b>	riutilizzabile, non sterile, non sterilizzabile
<b>Aree di applicazione raccomandate:</b>	<p>Le zone raccomandate per l'inserzione del set infusionale sono illustrate nella figura a fianco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona addominale</li> <li>• Fianco/Alto gluteo</li> <li>• Esterno coscia</li> <li>• Parte esterna del braccio</li> </ul> <p>Effettuare una corretta rotazione periodica del sito di inserzione per assicurare un'ottimale assorbimento del farmaco e ridurre la possibilità di reazioni cutanee.</p> 
<b>Modalità di applicazione:</b>	Il set di infusione Silhouette può essere posizionato nel sottocute manualmente o con l'aiuto di un <b>dispositivo di inserzione dedicato: Sil-serter</b> (MMT-385).
<b>Posizionamento con insertore Sil-serter:</b>	
<b>Materiali:</b>	policarbonato
<b>Modalità di conservazione:</b>	Conservare il serter nella posizione scarica (molla non caricata) per garantire prestazioni e durata ottimali.
<b>Assenza di lattice:</b>	Il prodotto NON contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico.