

# CRM

Cardiac Rhythm Management


Terapia di resincronizzazione cardiaca

Selectra

## Selectra

Sistema telescopico per il posizionamento di cateteri ventricolari sinistri in seno coronarico

- Valvola integrata tagliabile
- Design dell'impugnatura ergonomica
- Trasmissione della forza di torsione ottimizzata
- Rivestimento interno idrofilico
- Memoria di forma

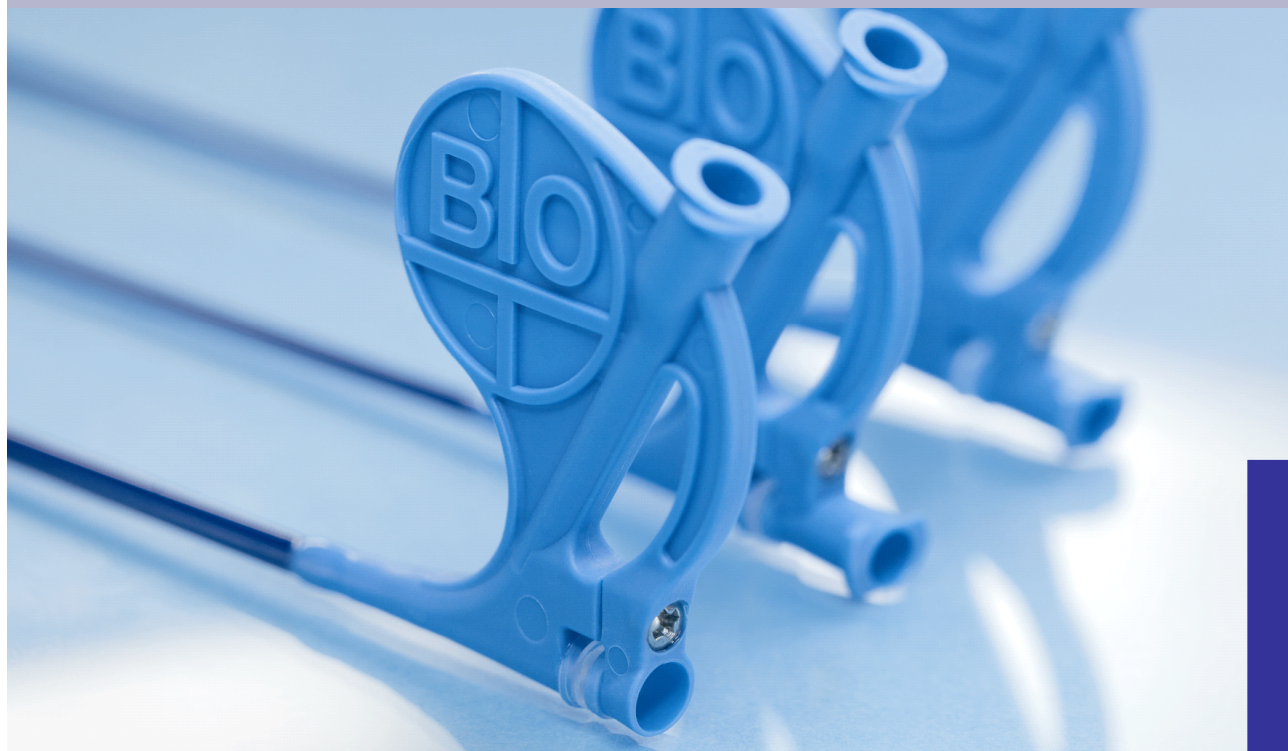

# Selectra

## Descrizione

Selectra è il nuovo sistema telescopico per il posizionamento di cateteri ventricolari sinistri in seno coronarico.

Grazie ad una serie di specifiche innovative il sistema permette il posizionamento sicuro e rapido di cateteri sinistri e la rimozione del sistema al termine della procedura riducendo al minimo i rischi di spostamenti.

### Sistema telescopico con sub-selettore

La combinazione dell'introduttore lungo Selectra con il relativo sub-selettore permette il posizionamento di cateteri a diametro ridotto come il Sentus OTW direttamente attraverso il sub-selettore stesso.

Il corpo del sistema Selectra è stato ingegnerizzato con diversi gradi di rigidità dalla parte distale a quella prossimale per permettere un'ottima trasmissione dei movimenti di torsione ma mantenere la flessibilità e l'atraumaticità necessarie.



### Design della punta atraumatico

La punta morbida e smussata garantisce la massima atraumaticità minimizzando il rischio di dissezioni.

Durante la manipolazione l'elevata stabilità della punta impedisce eventuali prolassi.

I nuovi marker radiopachi garantiscono una visibilità senza paragoni.



### Impugnatura ergonomica innovativa

La nuova impugnatura ergonomica garantisce facilità di taglio attraverso un unico movimento per qualsiasi angolo di impugnatura.

La valvola emostatica premontata riduce a zero le difficoltà di inserimento del catetere o del sub-

selettore.

La porta laterale per il lavaggio e l'iniezione di contrasto integrata permette l'utilizzo della siringa e la manipolazione del sistema contemporaneamente.



### Design dello Shaft superiore

La resistenza al kinking e il perfetto controllo della torsione sono garantiti dall'ingegnerizzazione dello shaft che è stato riprogettato da zero.

Il rivestimento interno idrofilico attivabile attraverso lavaggio preventivo permette l'inserimento e lo scorrimento di catetere o sub-selettore e la rimozione dell'intero sistema con un facilità mai sperimentata prima.

Il sistema Selectra è composto da 8 diverse curve per l'incannulazione del seno coronarico e due diverse curve per i sub-selettori.

Tutte le curve sono confezionate singolarmente. E' inoltre disponibile il kit di accessori Selectra che tra le altre cose comprende la nuova taglierina.

Anche quest'ultima rappresenta un avanzamento tecnologico unico: la taglierina è dotata di sistema a farfalla che aggancia il catetere e permette la rimozione del sistema senza alcun rischio di dislocamento.

La nuova lama garantisce inoltre un taglio preciso e sicuro in un'unico gesto.



# Selectra

## Dati Tecnici

### Introduttore lungo

Lunghezza effettiva	45 cm; 55 cm
Diametro interno	2,44 mm (7,3 F)
Diametro esterno	2,91 mm (8,7 F)
Materiale	PEBAX
Rivestimento interno	Rivestimento idrofilico

### Dilatatore

Lunghezza effettiva	53,5 cm; 63 cm
---------------------	----------------

### Sub-selettore


Lunghezza effettiva	65 cm; 75 cm
Diametro interno	1,83 mm (5,4F)
Diametro esterno	2,31 mm (6,9 F)
Materiale	PEBAX
Rivestimento interno	Rivestimento idrofilico
Angolo della punta	50°; 90°
Compatibilità filo guida	0,014" – 0,035"
Compatibilità cateteri	< 5 F
Connessione prossimale	Luer Lock femmina

### Numero d'ordine kit accessori Selectra

Kit accessori Selectra	375518
CND	C0580
Nr Repertorio	434274

La confezione contiene:

- 1 siringa Luer Lock da 12 cm<sup>3</sup>
- 4 strumenti per l'inserimento attraverso la valvola
- 1 guida Seldinger 150 cm
- 1 torque
- 1 taglierina Selectra
- 2 valvole bidirezionali passive
- 2 tappini
- 2 rubinetti a una via

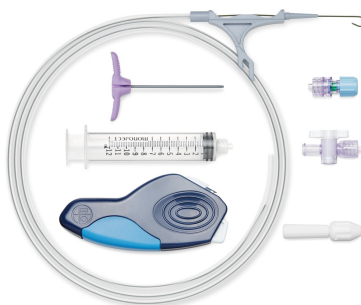

**Numero d'ordine Selectra introduttori lunghi**

Selectra "BIO2" 45 cm	375523	Nr. Repertorio 434401
Selectra "BIO2" 55 cm	375524	Nr. Repertorio 434402



Selectra "Amplatz 6.0" 45 cm	375519	Nr. Repertorio 434398
Selectra "Amplatz 6.0" 55 cm	375520	Nr. Repertorio 434400



Selectra "Extended Hook" 45 cm	375527	Nr. Repertorio 434404
Selectra "Extended Hook" 55 cm	375528	Nr. Repertorio 434405



Selectra "Hook" 45 cm	375529	Nr. Repertorio 434406
Selectra "Hook" 55 cm	375530	Nr. Repertorio 434407



Selectra "Multipurpose EP (MPEP)" 45 cm	375531	Nr. Repertorio 434408
Selectra "Multipurpose EP (MPEP)" 55 cm	375532	Nr. Repertorio 434410



Selectra "Multipurpose Hook (MPH)" 45 cm	375533	Nr. Repertorio 434412
Selectra "Multipurpose Hook (MPH)" 55 cm	375534	Nr. Repertorio 434414



Selectra "Right" 45 cm	375535	Nr. Repertorio 434415
Selectra "Right" 55 cm	375536	Nr. Repertorio 434417



Selectra "Straight" 45 cm	375537	Nr. Repertorio 434418
Selectra "Straight" 55 cm	375521	Nr. Repertorio 434419



CND	C0502	
-----	-------	--

La confezione contiene:

1 introduttore lungo Selectra

1 dilatatore

**Numero d'ordine Selectra sub-selettori**

Selectra "IC-50" 59 cm	392289	Nr. Repertorio 1147736/R
Selectra "IC-50" 69 cm	392290	Nr. Repertorio 1147737/R



Selectra "IC-90" 59 cm	392291	Nr. Repertorio 1147738/R
Selectra "IC-90" 69 cm	392292	Nr. Repertorio 1147739/R



CND	C0502	
-----	-------	--

La confezione contiene:

1 sub-selettore Selectra



**BIOTRONIK**  
excellence for life